



VULPES GOODS

BABY CARE

MILKCOLLECTOR

MANUAL

ENGLISH

3

User Guide

4

Characteristics and Application

8

NEDERLANDS

11

Gebruiksaanwijzing

12

Kenmerken en Toepassingen

16


VULPES GOODS®

BABYCARE


ENGLISH

USER GUIDE

When receiving the collector, make sure you install the parts correctly to prevent the product from leaking and working less efficient.

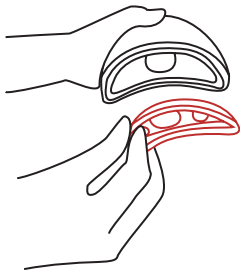


1. Install the plastic fixing bracket under the silicone upper part.

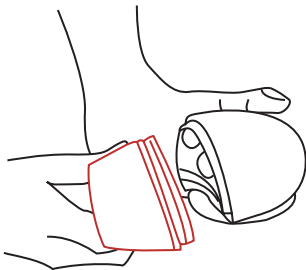

2. Install the upper set on the milk storage chamber.


After installing, make sure you keep the breast shield of the collector close to the breast to make it fit the breast closely.

Note: make sure the duckbill valve is upward.

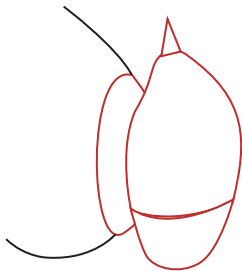


Start sucking milk slowly by pressing the middle of the collector.


Note: Press at the “pump” part for the best suction.

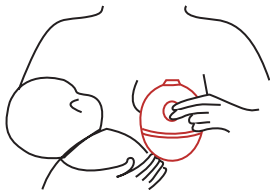

Put on the bra and fix the collector in position.


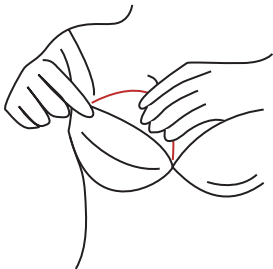


When done, take out the milk carefully by pressing the duckbill valve and pouring into a cup or storage bag

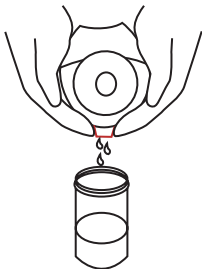

When done, make sure you clean the collector before storing it. Separate all the parts and clean them under rinsing water, remove all the residue.

Make sure you check out the Characteristics and application for the right way of cleaning.

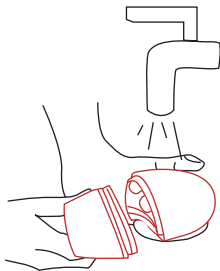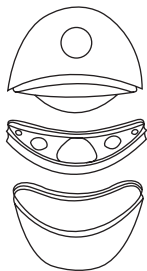

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- After each usage, make sure you clean the collector before storing it.
- The collector needs to be pressed manually, it will not work automatically.
- Keep the collector away from open fire.
- Do not use chemicals, soaps or other agents that may contain potentially harmful substances. These may pose a hazard to the product and user.
- Do not put the parts in the dishwasher. This may damage the flasks and is not covered by the warranty.
- Read the manual carefully. This will ensure that the pump is properly installed.

- Store the collector in a suitable place. This means that the product is not in contact (while storing) with moisture, water or dust and is out of reach of children. We recommend storing the flask in the product box.
- Use the collector in a comfortable place. A comfortable situation facilitates pumping and can increase yields.
- Keep the pump clean and free of milk residue. This promotes longevity and quality of pumping.
- Keep all extra pouches and containers out of the packaging. You can always store the parts in here if you do not use the breast pump for a longer period of time.
- Massage your breasts briefly before pumping, this can increase the yield and make you feel more

comfortable while pumping.

- Boil the collector in water for three to five minutes. Make sure the water is deep enough to completely cover the parts. Watch the stirring accessories during cooking to avoid deformation due to uneven heat.
- We do not recommend microwave or steam sterilisation. Keep in mind that some steam and microwave sterilisers reach high temperatures, which can melt plastic parts.
- We do not recommend ultraviolet sterilisation.
- Let the parts air dry or pat dry with kitchen paper. After all, this does not give off dust particles that are


VULPES GOODS®

BABYCARE


NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg er bij ontvangst van de collector voor dat je de onderdelen correct installeert om te voorkomen dat het product gaat lekken en minder efficiënt gaat werken.

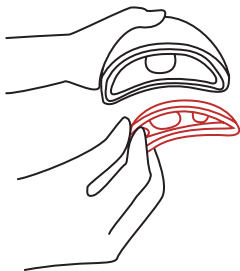


1. Installeer de bevestigingsbeugel onder het siliconen bovendeel.

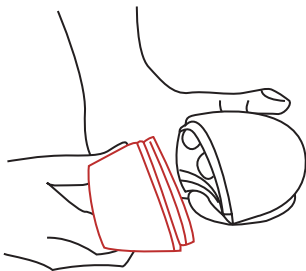


2. Installeer de collector aan de onderzijde. Zorg voor een passende aansluiting

Zorg er na het installeren voor dat je het borstschild van de collector dicht bij de borst houdt, zodat het goed aansluit op de borst.

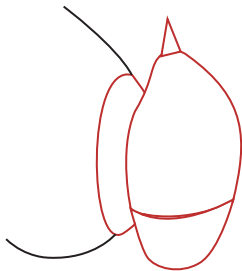


Let op: zorg ervoor dat de eendebekventiel naar boven staat.

Begin langzaam melk op te zuigen door op het midden van de collector te drukken.

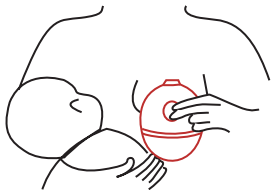


Let op: Druk op de “pump” voor de beste zuigkracht.



Doe de bh aan en zet de collector vast.

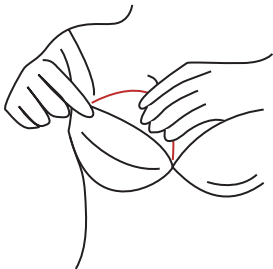

Als je klaar bent, haal je de melk er voorzichtig uit door op het eendebekventiel te drukken en giet je de melk in een beker of bewaarzak.

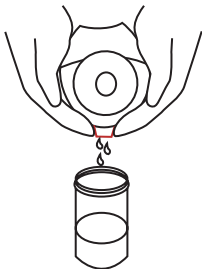

Als je klaar bent, moet je de collector schoonmaken voordat je hem opbergt. Haal alle onderdelen uit elkaar en reinig ze onder afspoelend water om alle resten te verwijderen. Zorg ervoor dat je de kenmerken en toepassing bekijkt voor de juiste manier van schoonmaken.

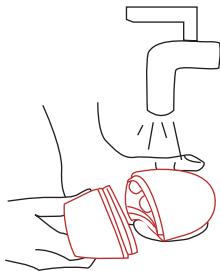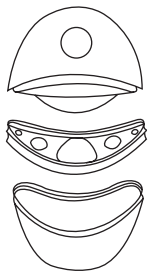

KENMERKEN EN TOEPASSING

- Maak de collector na elk gebruik schoon voordat je hem opbergt.
- De collector moet handmatig ingedrukt worden, hij werkt niet automatisch.
- Houd de collector uit de buurt van open vuur.
- Gebruik geen chemicaliën, zeep of andere middelen die mogelijk schadelijke stoffen bevatten. Deze kunnen een gevaar vormen voor het product en de gebruiker.
- Stop de onderdelen niet in de vaatwasser. Dit kan de kolven beschadigen en valt niet onder de garantie.
- Lees de handleiding zorgvuldig door. Dit zal ervoor zorgen dat de pomp correct geïnstalleerd wordt.

- Bewaar de collector op een geschikte plaats. Dit betekent dat het product (tijdens opslag) niet in contact komt met vocht, water of stof en buiten bereik van kinderen is.
- We raden aan om de kolf in de productdoos te bewaren.
- Gebruik de collector op een comfortabele plaats. Een comfortabele situatie vergemakkelijkt het kolven en kan de opbrengst verhogen.
- Houd de pomp schoon en vrij van melkresten. Dit bevordert de levensduur en de kwaliteit van het kolven.
- Bewaar alle extra zakjes en containers uit de verpakking. Je kunt de onderdelen hier altijd in bewaren als je de borstkolf langere tijd niet gebruikt.
- Masseer je borsten kort voor het kolven, dit kan de opbrengst verhogen en zorgt ervoor dat je je prettiger voelt tijdens het kolven.

- Kook de collector drie tot vijf minuten in water. Zorg ervoor dat het water diep genoeg is om de onderdelen volledig te bedekken. Let op de roeraccessoires tijdens het koken om vervorming door ongelijkmatige warmte te voorkomen.
- Sterilisatie in de magnetron of met stoom wordt afgeraden. Houd er rekening mee dat sommige stoom- en magnetronsterilisatoren hoge temperaturen bereiken, waardoor plastic onderdelen kunnen smelten.
- We raden ultravioletsterilisatie af.
- Laat de onderdelen aan de lucht drogen of dep ze droog met keukenpapier. Dit geeft immers geen stofdeeltjes af die schadelijk kunnen zijn.